

ReSound Unite™

ISTRUZIONI PER L'USO

ReSound Unite™ TV 2



ReSound GN

Benvenuti

Congratulazioni per l'acquisto di ReSound Unite™ TV 2.

ReSound Unite TV 2 collega la vostra TV, lo stereo HiFi, il computer o altri dispositivi direttamente ai vostri apparecchi acustici, inviando un segnale audio in modalità stereofonica.

Leggete con attenzione le informazioni contenute in questo opuscolo. Una corretta comprensione vi consentirà di usare al meglio ReSound Unite TV 2. Rivolgetevi al vostro audioprotesista per qualsiasi domanda.

Per ulteriori informazioni potete anche consultare il sito

www.resounditalia.com/unite

Per la vostra sicurezza, leggete attentamente il capitolo "Informazioni importanti", pagine 28-29.

Modello: SAS-3

FCC ID: X26SAS-3

Dichiarazione

Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 della normativa FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non dovrebbe causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono comprometterne il funzionamento.

Nota: questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 della Normativa FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in impianti domestici. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, qualora non sia installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio.

Comunque, non è possibile garantire che in un determinato impianto non si verifichino interferenze. Nel caso in cui questo apparecchio disturbi la ricezione radio o televisiva - a scopo di verifica, disattivarlo e quindi riattivarlo - cercare di eliminare il problema ricorrendo ad una delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.

Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

Collegare l'apparecchio a una presa o a un circuito diverso rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato per assistenza.

Cambiamenti o modifiche possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Uso previsto

ReSound Unite TV 2 è stato creato per consentirvi di sentire meglio la TV o altri programmi audio. La funzione di ReSound Unite TV 2 è quella di trasferire i segnali dalla TV e da altri dispositivi audio all'apparecchio acustico wireless ReSound.

Lista dei Paesi:

I prodotti sono destinati alla vendita nei paesi aderenti alla Comunità Europea e in Svizzera.

Restrizioni nazionali:

Norvegia: Non è consentito utilizzare lo strumento entro 20 km dal centro di Ny Ålesund.

Questo prodotto è conforme ai requisiti della seguente normativa:

Nell'UE: Il dispositivo è conforme ai Requisiti Essenziali ai sensi dell'Allegato I della direttiva del Consiglio Direttivo 93/42/EEC per i dispositivi medici (MDD) e ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti la Direttiva 1999/5/CE (R&TTE). La dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo www.resound.com

Negli U.S.A.: FCC CFR 47, parte 15, sottoparte C.

Altri requisiti normativi internazionali, pertinenti, validi nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Per queste regioni, attenersi ai requisiti locali validi nel Paese stesso.

L'apparecchio acustico è stato classificato come ricevitore di classe 2, secondo la normativa EN 300 328.

Modello: SAS-3

IC: 6941C-SAS3

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla norma canadese ICES-003.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla norma canadese NMB-003.

Questo dispositivo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) non deve provocare disturbi elettromagnetici e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono comprometterne il funzionamento.

In Giappone:


Il ministero degli Interni e delle Comunicazioni ha assegnato a questo dispositivo un numero di identificazione, in base all'Ordinanza relativa alla certificazione di conformità ai regolamenti tecnici di determinate apparecchiature radio (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則) Articolo 2-1-19 "È vietato modificare il dispositivo (in caso contrario, il numero di identificazione assegnato sarà invalidato)".

Indice


Descrizione del dispositivo	8
Avvio del dispositivo	10
Accoppiare gli apparecchi acustici	18
Attivare e disattivare lo streaming	21
Controlli.	24
Modalità di ritardo regolabile.	26
Informazioni importanti	27
Caratteristiche tecniche	30
Garanzia	30
Consigli per la soluzione di eventuali problemi	32

Descrizione del dispositivo

- 1 Porta Mini-USB
- 2 Pulsante per accoppiamento
- 3 Selettore mono/stereo
- 4 Ingresso audio analogico per mini-jack
- 5 Ingresso audio cavo ottico (Toslink)
- 6 Ingresso audio cavo coassiale

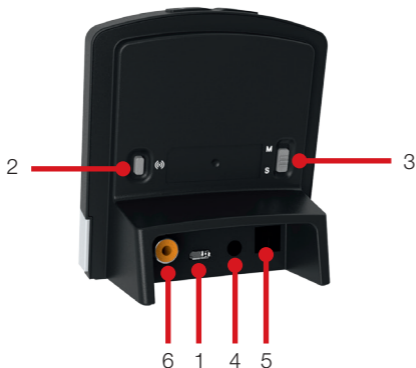

- 7 Aumento volume
- 8 Diminuzione volume
- 9 Spia luminosa color verde (acceso)
- 10 Spia luminosa color giallo (connesso)
- 11 Alimentatore
- 12 Attacco mini-USB

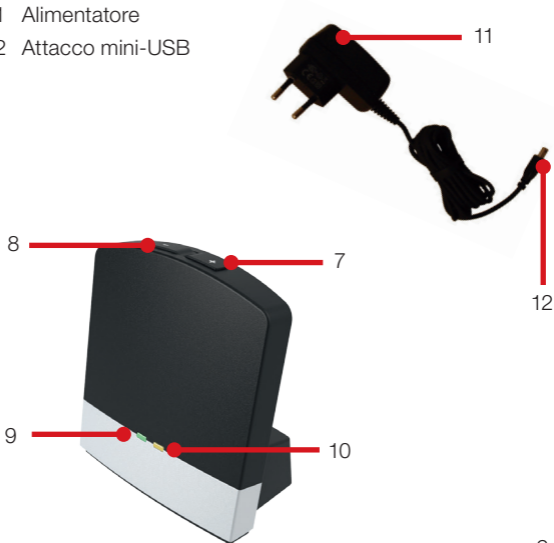

Avvio del dispositivo

Installare ReSound Unite TV 2

L'installazione di ReSound Unite TV 2 varia in base al tipo di TV, stereo HiFi, computer o altri sistemi audio in vostro possesso. I passi successivi vi guideranno nel processo di accoppiamento e connessione, che può essere facilmente eseguito da chiunque. Iniziare collegando i cavi e terminare accoppiando ReSound Unite TV 2 con i vostri apparecchi acustici.

i ReSound Unite TV 2 supporta sia l'ingresso audio analogico che quello digitale. Per informazioni sui formati audio supportati e su come collegare ReSound Unite TV 2 alle fonti audio, leggere le sezioni seguenti.

Collegare ReSound Unite TV 2 a una fonte audio analogica (ad es. TV o stereo HiFi)


1. Collegare l'alimentatore fornito da ReSound alla presa di corrente e inserire il cavetto Mini-USB nell'apposita porta di ReSound Unite TV 2.
2. Collegare la spina bianca e rossa del cavo audio alla presa bianca e rossa di ReSound Unite TV 2 (4 a pag. 8).
3. Inserire l'altra estremità del cavo audio rosso e bianco nel terminale "AUDIO OUT" sul televisore.

4. L'"AUDIO OUT" è solitamente contrassegnato con "L-R" che indicano rispettivamente "Sinistra e Destra", e "AUDIO OUT" si trova dietro alla TV.

i *Nota:* con questa installazione, molte TV e fonti audio inviano il segnale acustico ad entrambi gli apparecchi e agli altoparlanti della TV e delle fonti audio contemporaneamente. In alcuni dispositivi audio si può regolare il bilanciamento tra l'"AUDIO OUT" e gli altoparlanti.

Consultare il manuale

d'uso della vostra TV.

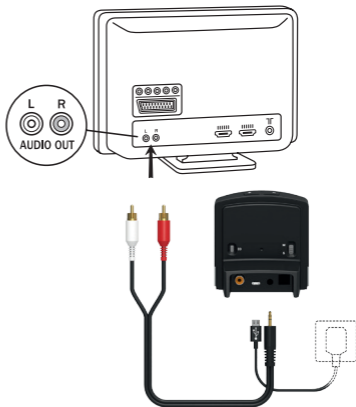

Alternativa di installazione del cavo audio

Se non fosse possibile collegare ReSound Unite TV 2 al cavo AUDIO OUTPUT della fonte audio, ci sono altre alternative di installazione possibili:

Adattatore Mini-jack:

1. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente e inserire il cavo Mini-USB nell'apposita porta ReSound Unite TV 2.
2. Collegare la spina bianca e rossa del cavo audio alla presa bianca e rossa di ReSound Unite TV 2 (4 a pag. 8).
3. Collegare l'adattatore mini-jack all'altra estremità del cavo audio.
4. Inserire l'adattatore mini-jack nella presa per le cuffie della TV o in alternativa al terminale audio del pc.

i *Nota: il terminale di uscita per le cuffie solitamente si trova sul lato o davanti alla fonte audio. Quando si usa il terminale di uscita per le cuffie, solitamente solo la persona che indossa gli apparecchi acustici può sentire il suono, mentre gli altoparlanti della TV sono disattivati. Se non si desiderano gli altoparlanti disattivati, consultare la guida della prima installazione o quella qui*


sottostante della presa SCART. Può essere che il vostro televisore (o fonte audio) possa supportare altoparlanti e cuffie contemporaneamente, controllare il libretto di istruzioni della TV.



Presca Scart:

1. Collegare l'alimentatore alla presa a muro e inserire il cavo alla presa Mini-USB di ReSound Unite TV 2.
2. Collegare la spina rossa e bianca del cavo audio alla spina rossa e bianca di ReSound Unite TV 2 (4 a pag. 8).
3. Collegare l'adattatore scart all'altra estremità del cavo audio.
4. Inserire l'adattatore scart al terminale scart della TV.

i Nota: l'uscita della presa scart si trova in genere dietro o sul lato del televisore o della fonte audio. Consultare il relativo libretto di istruzioni se è necessario apportare modifiche sul trasferimento del suono.

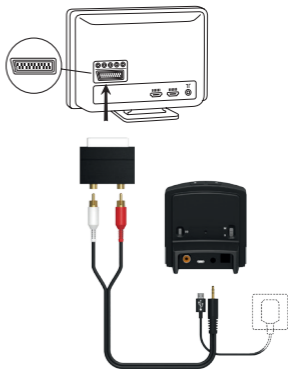

Collegare ReSound Unite TV 2 a una fonte audio digitale (ad es. TV o stereo HiFi)

i *Unite TV 2 supporta sia l'ingresso audio analogico che quello digitale. Quando si utilizza l'ingresso audio digitale, sono supportati i seguenti formati:*

Stereo PCM

- Frequenza di campionamento: fino a 192 kHz
- Risoluzione: fino a 32 bit

Dolby Digital

- Canali: Max 5.1
- Velocità di trasmissione: da 32 kbs a 640 kbs
- Frequenza di campionamento: 32, 44.1 e 48 kHz


Nota: i formati Dolby Digital Plus (richiede un'interfaccia HDMI), Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, Dolby Digital EX, Dolby Digital Surround EX, e AAC (Advanced Audio Codec) non sono supportati.

Utilizzare l'ingresso audio cavo ottico (Toslink)

1. Collegare la spina alla presa a muro e inserire il cavo nella presa Mini-USB su Unite TV 2
2. Inserire una delle spine del cavo audio ottico nella relativa presa (5 a pag. 8) su Unite TV 2


Nota: la maggior parte dei cavi ottici sono forniti di un piccolo cappuccio protettivo che ne protegge l'estremità. Prima di inserire il cavo, rimuovere il cappuccio protettivo.

3. Inserire l'altra estremità del cavo audio ottico nella porta di "Uscita audio digitale/ottica" del dispositivo audio o TV

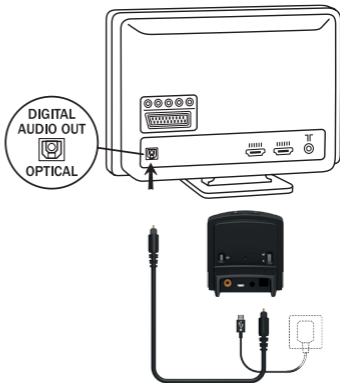

Utilizzare l'ingresso audio cavo coassiale

1. Collegare la spina alla presa a muro e inserire il cavo nella presa Mini-USB su Unite TV 2
2. Inserire una delle spine del cavo audio coassiale nella relativa presa (6 a pag. 8) su Unite TV 2
3. Inserire l'altra estremità del cavo audio coassiale nella porta di "Uscita audio digitale/coassiale" del dispositivo audio o TV

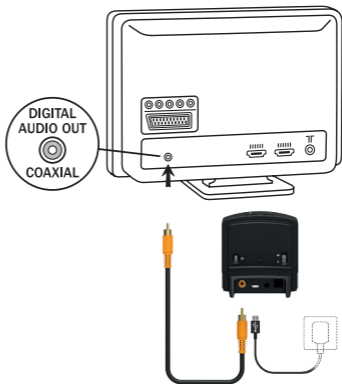

Accoppiare gli apparecchi acustici

I Nota! Le seguenti informazioni sono principalmente per il vostro audioprotesista, che svolgerà le operazioni necessarie prima che Unite TV 2 possa essere utilizzato con gli apparecchi acustici. Tuttavia questa operazione può essere effettuata da chiunque.

E' possibile accoppiare fino a tre dispositivi per lo streaming - ad esempio due Unite TV 2 e un Mini Microphone ReSound Unite™ (accessorio opzionale) - con una determinata coppia di apparecchi acustici. Pertanto, il canale 1, 2 o 3 deve essere selezionato quando si avvia il processo di accoppiamento.

Accoppiamento di Unite TV 2 nel canale 1

1. Assicurarsi che Unite TV 2 sia collegato alla presa a muro e che la spia luminosa verde (9 a pag. 9) sia accesa. I vostri apparecchi acustici, invece, devono essere spenti. Aprire il vano pila.
2. Premere una volta il pulsante per accoppiamento su Unite TV 2 (2 a pag. 8). La spia gialla sulla parte anteriore di Unite TV 2 lampeggia ora una volta ogni 2 secondi (10 a pag. 9) per indicare che è pronto per essere accoppiato nel canale 1. Il

vostro Unite TV 2 rimarrà in modalità di accoppiamento per 20 secondi.

3. Mentre è attiva la modalità di accoppiamento, chiudere i vani pila di entrambi gli apparecchi acustici e assicurarsi che siano accesi. Un suono udibile in entrambi gli apparecchi indica che l'accoppiamento è stato completato. Ora potete utilizzare ReSound Unite TV 2.

Accoppiare Unite TV 2 nel canale 2

1. Premere 2 volte il pulsante di accoppiamento. La spia luminosa gialla sulla parte anteriore di Unite TV 2 lampeggia ora due volte ogni 2 secondi per indicare che è pronto per essere accoppiato nel canale 2.
2. Mentre la modalità di accoppiamento è attiva, chiudere il vano pila di entrambi gli apparecchi acustici.

Accoppiamento di Unite TV 2 nel canale 3

1. Premere tre volte il pulsante di accoppiamento. La spia gialla sulla parte anteriore di Unite TV 2 lampeggia ora tre volte ogni 2 secondi per indicare che è pronto per essere accoppiato nel canale 3.
2. Mentre la modalità di accoppiamento è attiva, chiudere il vano pila di entrambi gli apparecchi acustici.

Lampeggiamento della spia luminosa in fase di accoppiamento:

Pressioni sul pulsante di accoppiamento	Lampeggiamento spie luminose				Canale
1	1	1	1	1	1
2	1 2	1 2	1 2	1 2	2
3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	3

Attivare e disattivare lo streaming

Accendere la TV, lo stereo HiFi, il computer o altri dispositivi audio collegati a Unite TV 2. Assicurarsi che gli apparecchi acustici siano accesi. È possibile attivare lo streaming in due modalità.

1. Tenere premuto il pulsante di entrambi gli apparecchi acustici per circa tre secondi. Questo deve essere fatto separatamente su entrambi gli apparecchi acustici per poter sentire l'audio in streaming in entrambe le orecchie, a meno che sugli apparecchi acustici non sia abilitata la sincronizzazione da dispositivo a dispositivo. Una volta che Unite TV 2 è stato collegato, si udirà un suono in entrambi gli apparecchi acustici seguito dal suono audio in streaming.
2. Se si possiede un ReSound Unite™ Remote Control (facoltativo), è sufficiente premere il tasto TV Unite. Una volta che gli apparecchi acustici saranno connessi con ReSound Unite TV 2, si udirà un suono in entrambe le orecchie, che confermerà la presenza dello streaming audio e apparirà un'icona dello streaming sul display. Il suono in streaming può essere ora sentito negli apparecchi acustici.

Attivare lo streaming su un secondo o un terzo ReSound Unite TV 2

Se è disponibile più di un dispositivo ReSound Unite TV 2, si può premere il tasto TV Unite sul Remote Control una seconda o una terza volta, a seconda del dispositivo TV dal quale si desidera ascoltare.



Fino a tre unità Unite TV 2 vengono inizialmente identificate con le lettere A, B o C e l'unità Unite TV 2 in uso è indicata sul display del Remote Control 2. Non avendo disponibile il Remote Control 2 tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante dell'apparecchio acustico una seconda o terza volta per accedere al secondo o terzo Unite TV 2.

Disattivare lo streaming

Premere brevemente il pulsante su entrambi gli apparecchi acustici. Questo annullerà lo streaming sul lato premuto.

Nota: se gli apparecchi acustici hanno la funzione di sincronizzazione da dispositivo a dispositivo abilitata, premere il pulsante su uno qualsiasi degli apparecchi acustici per riportare entrambi gli apparecchi all'ultimo programma utilizzato.

Con ReSound Unite Remote Control™ (opzionale) si deve semplicemente premere il tasto "P", situato al centro della tastiera. Questo farà tornare gli apparecchi acustici all'ultimo programma. Potrete premere inoltre il pulsante "home" per tornare alle impostazioni di default.

Se state utilizzando il telefono con ReSound Unite Phone Clip+™ o PhoneNow™, lo streaming di ReSound Unite TV 2 verrà interrotto momentaneamente, e riprenderà al termine della telefonata.

i *Nota! E' possibile uscire dal raggio (> 7 m) di Unite TV 2 . Se rientrate nel raggio entro 5 minuti, gli apparecchi acustici si ricollegheranno automaticamente e lo streaming riprenderà.*

Controlli

Regolare il volume

ReSound Unite TV 2 è stato progettato per fornire un livello di ascolto confortevole, dal momento in cui viene attivato. Tuttavia, per alcuni dispositivi o ambienti di ascolto può essere desiderabile regolare il volume di ascolto, in diversi modi. Si prega di tener presente che le regolazioni del volume vengono applicate solo al segnale con streaming e non al volume di un ambiente sonoro normale.

Usare i pulsanti "+" e "-" (7 e 8 a pag. 9) per regolare il volume ad un livello confortevole. Assicuratevi che i vostri apparecchi abbiano un volume adatto prima di cambiare le impostazioni del volume. Normalmente tale regolazione è necessaria solo una volta, in quanto Unite TV 2 conserverà l'ultima impostazione del volume.

Utilizzare ReSound Unite Remote Control 2 (opzionale) per regolare sia il volume dell'audio in streaming che il volume del microfono dell'apparecchio acustico*. Per ulteriori informazioni sugli accessori, chiedete al vostro audioprotesista.

In alcuni casi il volume può essere regolato ulteriormente alla sorgente del segnale, per esempio riducendo il volume della TV stessa. In molti casi questo regolerà il volume dello streamer trasmesso.

**La regolazione sia del volume degli apparecchi acustici che dell'audio in streaming è disponibile solo con ReSound Unite™ Remote Control 2.*

so in modalità wireless agli apparecchi acustici. Di conseguenza questo avrà effetto sul volume dell'intera stanza.

Controllo Mono/Stereo

Si può utilizzare il pulsante controllo Mono/Stereo (3 a pag. 8) settandolo in Stereo (canale 2) o Mono (canale 1). Per il fitting binaurale, è preferibile settare il pulsante in modalità Stereo. Per quello monoaurale, posizionare il pulsante in modalità Mono.

Modalità di ritardo regolabile

Raramente, può succedere che non ci sia sincronia tra l'audio inviato in streaming agli apparecchi acustici e il suono proveniente dagli altoparlanti della TV (eco), o tra l'audio inviato in streaming e le immagini della TV (di sincronia labiale). Ciò risulta evidente in sistemi audio più complessi, in cui Unite TV 2 non è collegato direttamente alla TV (ad es. quando si utilizza un set-top box o altra unità ausiliaria).

Per risolvere tale problema, il ritardo di streaming da Unite TV 2 va regolato nel modo seguente:

1. Verificare che Unite TV 2 sia acceso e che gli apparecchi acustici stiano ricevendo l'audio in streaming
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento (2 a pag. 8) per 3 secondi. Adesso, Unite TV 2 entrerà in modalità di ritardo regolabile e la spia verde sul pannello anteriore di Unite TV 2 lampeggerà ogni 2 secondi. La spia gialla si accenderà ogni volta che è presente un segnale audio
3. Usare i pulsanti "+" e "-" (7 e 8 a pag. 9) sulla parte superiore di Unite TV 2 per aumentare o diminuire il ritardo del segnale in step di 10 ms. Il segnale in streaming può essere ritardato nel range di 0-250 ms
4. Una volta raggiunta la sincronizzazione ottimale tra l'audio inviato in streaming agli apparecchi acustici e i suoni provenienti

dagli altoparlanti della TV, o tra l'audio inviato e le immagini della TV, premere e tenere premuto il tasto di abbinamento per 3 secondi. Adesso Unite TV 2 riprenderà il suo normale funzionamento, indicato dalla spia verde fissa

I valori impostati in modalità di ritardo regolabile verranno archiviati in Unite TV 2.

Se non si esce dalla modalità di ritardo regolabile tenendo premuto il tasto di accoppiamento per 3 secondi, Unite TV 2 riprenderà il funzionamento normale dopo 30 minuti.

Per reimpostare il ritardo su 0 ms (impostazione predefinita), tenere premuto il tasto di accoppiamento e allo stesso tempo accendere Unite TV 2.

Informazioni importanti

Manutenzione e pulizia

Pulite Unite TV 2 con un panno umido. Non utilizzate prodotti per la casa (sapone, detersivi, ecc.) o alcol per pulirlo.

Quando non usate ReSound Unite TV 2 staccate la spina dalla presa di corrente.

Avvertenze generali

Tenere ReSound Unite TV 2 fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

ReSound Unite TV 2 utilizza un'alimentazione a bassa trasmissione digitale codificata per comunicare con altri apparecchi wireless. Sebbene sia alquanto improbabile, i dispositivi elettronici nelle vicinanze potrebbero essere danneggiati. In questo caso allontanate ReSound Unite TV 2 dal dispositivo elettronico disturbato.

Utilizzare Unite TV 2 solo con l'alimentatore fornito insieme al prodotto. L'uso di altri tipi di alimentatori potrebbe danneggiare il prodotto e potrebbe essere pericoloso, e potrebbe inoltre annullare la garanzia del prodotto.

- Per staccare la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente, non tirate il cavo, ma la spina
- Non utilizzate mai un cavo danneggiato
- Non cercate di smontare l'alimentatore: potreste prendere la scossa
- Non utilizzate l'alimentatore all'aperto o in zone umide

Se utilizzando resound Unite TV 2 questo subisce interferenze da altre apparecchiature elettromagnetiche, allontanatevi dalla fonte.

Precauzioni Generali



I vostri apparecchi acustici e ReSound Unite TV 2 sono stati regolati con un proprio codice di comunicazione durante il fitting. Questo fa sì che ReSound Unite TV 2 non interferisca con apparecchi acustici indossati da altre persone.

Strumentazioni ad alta potenza, apparecchiature elettroniche, grandi impianti elettronici e strutture metalliche possono ridurre significativamente il campo di funzionamento.

Utilizzare solamente gli accessori ReSound.

Non alterare o modificare ReSound Unite TV 2.

Aprire ReSound Unite TV 2 può comportare danni al dispositivo stesso. Se accade qualcosa che non può essere risolto leggendo la guida rapida sulla risoluzione di eventuali problemi contenuta in questo libretto, vi consigliamo di consultare il vostro audioprotesista.

ReSound Unite TV 2 può essere riparato solo da un centro autorizzato.

Non utilizzare ReSound Unite TV 2 in quei luoghi o aree dove trasmissioni a radio frequenza (RF) sono vietate, come ad esempio in aereo, ecc.

Connettere ReSound Unite TV 2 solo con quei dispositivi per i quali è stato esplicitamente progettato.

Caratteristiche tecniche

Raggio di operatività:	fino a 7 metri
Alimentazione:	presa a muro
Wireless:	2.4 GHz
Temperatura di funzionamento:	da 0 a 55° C
Temperatura di conservazione:	da -20 a 60° C

Informazioni sui test eseguiti per verificare temperatura, trasporto e conservazione.

Il prodotto è stato sottoposto a diversi test di temperatura e cicli di calore e umidità tra -25° C e +70° C in accordo con gli standard di fabbricazione.

Garanzia

ReSound Unite TV 2 è coperto da garanzia limitata a 12 mesi rilasciata dal produttore dal giorno dell'acquisto. Per favore notate che una garanzia estesa può essere applicata nel vostro paese. Contattate il vostro audioprotesista di fiducia per ulteriori informazioni.

Cos'è coperto dalla garanzia?

Qualsiasi componente elettrico che a causa di difetti di fabbricazione durante la copertura della garanzia provochi malfunzionamento del dispositivo, sarà sostituito o riparato senza spese se riportato dal rivenditore dove questo è stato acquistato.

Se si dovesse determinare che il dispositivo non può essere riparato, sarà possibile sostituirlo con un altro in base agli accordi esistenti tra audioprotesista e cliente.

Cosa non è coperto dalla garanzia?

Tutto ciò che deriva da una cattiva manutenzione, uso improprio, cadute, riparazioni non autorizzate, corrosione, danni causati da oggetti estranei nel dispositivo, NON è coperto dalla garanzia. Questa garanzia non pregiudica i diritti legali che potreste avere sotto l'applicazione della legislazione nazionale inerente la vendita dei prodotti di consumo. Il vostro audioprotesista potrebbe aver rilasciato una garanzia che va oltre le clausole di questa garanzia limitata. Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare il vostro audioprotesista di fiducia.

Numero di matricola _____

Data di acquisto _____

Consigli per la soluzione di eventuali problemi

SINTOMO	CAUSA
<i>Premendo il pulsante TV del Remote Control non si ha alcun effetto</i>	Unite TV 2 e gli apparecchi acustici non sono stati accoppiati Remote Control e gli apparecchi acustici non sono nel raggio d'azione wireless
<i>E' stato premuto il pulsante cambio programma negli apparecchi acustici per 3 secondi ma senza alcun effetto</i>	Unite TV 2 e gli apparecchi acustici non sono stati accoppiati
<i>Su Unite TV 2 è stato premuto il pulsante per l'accoppiamento, ma negli apparecchi acustici non si sente nessun segnale di accoppiamento</i>	Unite TV 2 e l'apparecchio non sono nel raggio d'azione wireless Unite TV 2 e l'apparecchio non sono stati accoppiati contemporaneamente

POSSIBILE RIMEDIO

Procedere all'accoppiamento

Assicurarsi che Remote Control e gli apparecchi acustici siano nel raggio d'azione wireless e attivare nuovamente lo streaming

Procedere all'accoppiamento

Assicurarsi che Unite TV 2 e l'apparecchio siano nel raggio d'azione wireless e ripetere il procedimento di accoppiamento

Ripetere il procedimento di accoppiamento e accertarsi che il vano batteria su entrambi gli apparecchi sia chiuso entro 20 secondi dopo che il pulsante per l'accoppiamento su Unite TV 2 è stato premuto

SINTOMO	CAUSA
<i>E' stato premuto il pulsante TV nel telecomando ma non è stato trovato il segnale audio in streaming quando compare ricerca per (indicata da un'icona "X" nel display)</i>	<p>Unite TV 2 e gli apparecchi acustici non sono nel raggio d'azione wireless</p> <p>Unite TV 2 non è collegato correttamente alla TV</p> <p>Unite TV 2 può essere spento o il volume della TV è disattivato</p>
<i>Non c'è alcun suono negli apparecchi sebbene ci si trovi nel programma di streaming</i>	<p>Unite TV 2 e gli apparecchi non sono nel raggio d'azione wireless</p> <p>La TV potrebbe essere stata spenta o il suono della TV è stato disattivato</p>
<i>Il suono proveniente dalla TV è distorto</i>	<p>Il volume in ingresso dalla TV è troppo alto</p>

POSSIBILE RIMEDIO

Assicurarsi che Unite TV 2 e gli apparecchi siano nel raggio d'azione wireless e attivare nuovamente lo streaming

Collegare correttamente il cavo tra Unite TV 2 e la TV e attivare nuovamente lo streaming

Accendere o riattivare il volume della TV e attivare nuovamente lo streaming

Assicurarsi che Unite TV 2 e gli apparecchi siano nel raggio d'azione wireless

Accendere o riattivare il volume della TV

Regolare il volume da Unite TV 2 fino a quando il suono non è più distorto

SINTOMO	CAUSA
<i>Il livello di volume da Unite TV 2 è troppo basso</i>	Il volume in ingresso dalla TV è troppo basso
<i>Il suono proveniente da Unite TV 2 è distorto o di tanto in tanto viene distorto</i>	Unite TV 2 e gli apparecchi sono al limite del raggio d'azione wireless Unite TV 2 e gli apparecchi non sono entro la copertura del raggio di azione wireless
<i>Il suono da Unite TV 2 non è sincronizzato con le immagini della TV</i>	La vostra TV non è in grado di sincronizzare il suono dall'uscita suono selezionata e l'immagine

POSSIBILE RIMEDIO

Premere "+" e "-" nei comandi di Unite TV 2 fino a quando il suono è sufficientemente forte

Avvicinarsi leggermente a Unite TV 2

Assicurarsi che Unite TV 2 sia posizionato in modo adeguato, che sia facilmente raggiungibile e che lo streaming non sia ostacolato da qualche oggetto

Se possibile, provate ad usare un'altra uscita audio della vostra TV. In alternativa, seguire le istruzioni alla sezione "Modalità di ritardo regolabile" del presente manuale. Se il problema persiste, contattare il vostro rivenditore TV

Lo streaming audio di Unite TV 2 non ha quasi latenza e in se stesso non contribuisce ad alcun errore di sincronia labiale

SINTOMO	CAUSA
<i>Il suono da Unite TV 2 non è sincronizzato con il suono delle casse della TV</i>	La vostra TV non è in grado di sincronizzare il suono dall'uscita suono selezionata con il suono delle casse della TV
<i>Il suono dagli apparecchi acustici può essere troppo basso o troppo alto</i>	L'audio in ingresso non è adatto per l'ascolto
<i>Un apparecchio acustico si disconnette involontariamente dal programma di streaming</i>	Unite TV 2 e gli apparecchi acustici sono stati fuori dal raggio d'azione wireless per più di 5 minuti La batteria negli apparecchi è così scarica che non può supportare lo streaming

POSSIBILE RIMEDIO

Se possibile, provate ad usare un'altra uscita audio dalla vostra TV. In alternativa, seguire le istruzioni alla sezione "Modalità di ritardo regolabile" del presente manuale. Se il problema persiste, contattate il vostro rivenditore TV

Lo streaming audio di Unite TV 2 non ha quasi latenza e in se stesso non contribuisce ad alcun effetto di riverbero

Regolare il volume con i pulsanti "+" e "-" di Unite TV 2 fino ad ottenere un volume confortevole

In alternativa (opzionale) si possono usare i tasti "+" e "-" del telecomando per effettuare questa operazione

Assicurarsi che Unite TV e gli apparecchi siano nel raggio d'azione wireless e attivare nuovamente lo streaming


Sostituire la batteria degli apparecchi acustici


Fare attenzione alle informazioni contrassegnate da questi simboli:

i **ATTENZIONE** indica una situazione che può comportare lesioni gravi

PRUDENZA indica una situazione che può comportare lesioni di lieve entità o poco gravi

i Consigli e suggerimenti su come gestire al meglio il vostro accessorio ReSound Unite

 Apparecchiatura con radio frequenze

 L' apparecchio è un prodotto di categoria B con parte applicata

i Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.



Consultare il proprio audioprotesista riguardo allo smaltimento dell'accessorio ReSound Unite. Il consumatore finale detentore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica AEE domestica giunta a fine vita, per disfarsene potrà: conferirla gratuitamente presso il centro di raccolta pubblico (isola ecologica) del proprio comune; consegnarla al distributore in cambio dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova equivalente per funzioni, in ragione di una a una. La Direttiva di riferimento è la 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Qualsiasi quesito inerente la normativa sui dispositivi medici EU o direttiva del consiglio 93/42/CEE e direttiva R&TTE1999/5/CEE, deve essere indirizzato a: GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Danimarca

Sede centrale

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

Italia

GN Hearing Srl
Via Nino Bixio 1/B
35036 Montegrotto Terme
Padova
Tel.: +39 049 8911511
Fax: +39 049 8911450
info@gnhearing.it
www.resounditalia.com

Svizzera

GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwill
Tel.: +41 1 722 91 11
Fax: +41 1 722 91 12
www.resound.ch