

ReSound Unite™

HANDLEIDING

ReSound Unite™ Afstandbediening 2



ReSound



rediscover hearing

Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van de ReSound Unite™ Afstandbediening 2.

Met de Afstandbediening 2 kunt u uw draadloze ReSound hoortoestellen bedienen. Het is een elegante en gebruiksvriendelijke afstandbediening met een statusdisplay, waarmee u draadloos toegang heeft tot de functies op uw hoortoestellen.

Met de Afstandbediening 2 kunt u beide hoortoestellen tegelijk bedienen. U kunt de hoortoestellen ook afzonderlijk bedienen, zodat u ze perfect kunt afstemmen op een specifieke hoorsituatie.

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw Afstandbediening 2. Raadpleeg uw audicien bij overige vragen.

Ga voor meer informatie naar de website www.resound.nl.

Lees voor uw veiligheid aandachtig het hoofdstuk 'Belangrijke informatie' op pagina 31 - 35 door.

FCC ID: X26RC-2

Verklaring:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels

Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: (1) dit apparaat mag geen storende interferentie veroorzaken en (2) elke vorm van interferentie moet worden geaccepteerd, inclusief interferentie die leidt tot ongewenste werking.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan een Klasse B digitaal apparaat worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. Als dit apparaat storende interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen te bepalen is door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met één van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten.
- De verkoper of een ervaren radio/televisiemonteur raadplegen.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

Gebruikersbestemming

De Afstandbediening 2 is bedoeld om een draadloos hoortoestel van ReSound op afstand te bedienen. De belangrijkste functie van de Afstandbediening 2 is het zenden van signalen naar een draadloos ReSound hoortoestel, waarmee het volume en het programma kan worden aangepast.

Lijst van landen

Producten zijn bedoeld voor verkoop in landen binnen de Europese Economische Gemeenschap en Zwitserland.

Nationale restricties:

Noorwegen: Het is niet toegestaan dit product te gebruiken binnen 20 km van het centrum van Ny Ålesund.

Dit product is in overeenstemming met de volgende standaard reglementen:

In de EU: Het toestel voldoet aan de Essentiële Vereisten conform - Bijlage I van Richtlijn 93/42/EEC van de Raad voor medische apparatuur (MDD) en essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De conformiteitsverklaring kan worden ingezien op www.resound.com.

In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.

In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende gebieden de nationaal geldende vereisten.

IC: 6941C-RC2

Dit digitaal apparaat in klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) elke vorm van interferentie moet wor-

den geaccepteerd, inclusief interferentie die leidt tot ongewenste werking.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

In JP:


Dit toestel heeft een toewijzing gekregen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie onder "Verordening betreffende technische regels conformiteitscertificaat, enz. van gespecialiseerde radioapparatuur (特定無線設備の技術基準適合証明 等に関する規則)" Artikel 2-1-19 "Dit apparaat mag niet aangepast worden (anders is het toegekende bestemmingsnummer ongeldig)."

Inhoud


Beschrijving	8
Van start	10
Het volume aanpassen	12
Basisinstellingen herstellen	14
Waarschuwing lage accuspanning	15
Operationeel bereik.....	17
Scherm	18
Werking Afstandbediening 2	18
Pairen.....	19
Optionele audiostreamers gebruiken	21
Streaming activeren van de ReSound Unite™ TV	22
Volume aanpassen in streamingmodus	24
Telefoon (optioneel)	27
Bijlage: uitzonderingen op normaal gebruik	28
Belangrijke informatie.....	31
Technische specificaties	36
Garantie	37
Oplossen van problemen	40
Opmerkingen.....	46

Beschrijving

- 1 Aan/uit-schakelaar
- 2 Scherm
- 3 Streaming (met optionele TV Streamer of MiniMicrofoon)
- 4 HOME
- 5 Muteknop voor microfoon hoortoestellen

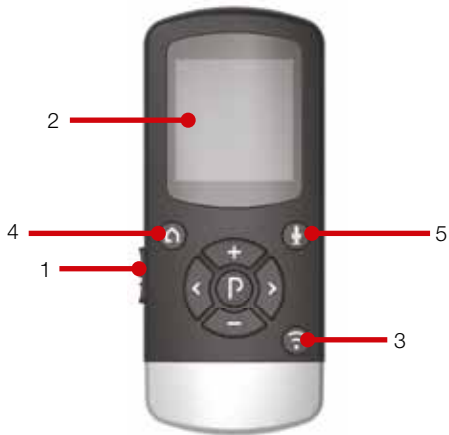

- 6 Volume omhoog
- 7 Volume omlaag
- 8 Alleen linkerhoortoestel selecteren
- 9 Alleen rechterhoortoestel selecteren
- 10 Programma wijzigen
- 11 Pairen

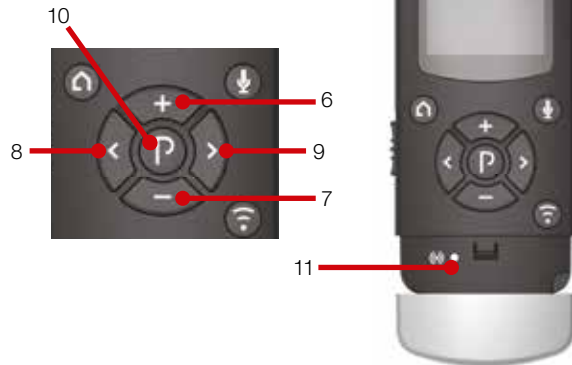

Van start

Accu opladen

Voor u de Afstandbediening 2 kunt gebruiken, moet u de oplaadbare accu volledig opladen. Sluit het oplaadsnoer aan zoals weergegeven op de tekening. Steek daarna de stekker in het stopcontact. Tijdens het laden worden op de accumulator voortdurend één, twee of drie balken weergegeven. Als de accu volledig opgeladen is, worden de drie balken continu weergegeven.



Uw Afstandbediening 2 in- en uitschakelen

Om uw Afstandbediening 2 AAN te zetten, schuift u de aan/uit-schakelaar (1 op pagina 8) naar de positie AAN. Een wit 'I'-streepje wordt zichtbaar onderaan de schakelaar en het scherm gaat aan.

Om uw Afstandbediening UIT te zetten schakelt u de aan/uit-schakelaar naar de positie UIT.




Laad de Afstandbediening 2 niet op terwijl deze op het lichaam wordt gedragen.

Van programma wisselen

U kunt de knop 'P' (10 op pagina 9) gebruiken om te wisselen tussen de programma's die uw audicien in uw hoortoestellen geprogrammeerd heeft. De naam van het programma kan door uw audicien ingesteld worden. Met elke druk op de knop 'P' gaat het programma één stap verder, om aan het eind van de cyclus terug te keren naar programma 1 (bijv. 1, 2, 3, 1). Iedere keer als u naar een ander programma schakelt, hoort u een of meer pieptonen in beide hoortoestellen en wordt het programma dat in gebruik is op het scherm weergegeven. Uw audicien kan deze functie ook uitschakelen tijdens de aanpassing. Voor de beste prestaties wordt aanbevolen beide hoortoestellen in te stellen op hetzelfde programma.



Programma 1 'Basis'

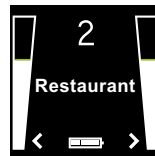

Programma 2
'Restaurant'

Het volume aanpassen


Het volume in beide hoortoestellen aanpassen

U kunt het volume aanpassen met de toetsen '+' en '-' (6 en 7 op pagina 9). Dit kan voor beide hoortoestellen tegelijk of aan iedere kant afzonderlijk. Standaard zijn beide hoortoestellen 'actief'. Dit ziet u aan de twee pijltjes (< en >) naast de volumebalken op het scherm. U kunt beide hoortoestellen tegelijkertijd harder zetten door op de knop '+' te drukken of zachter door op de knop '-' te drukken. Iedere aanpassing wordt aangegeven door een pieptoon in beide hoortoestellen, als dit niet is uitgeschakeld door uw audicien tijdens de aanpassing. Daarnaast wordt de weergave van de volumebalken op het scherm aangepast. Het standaard volumeniveau wordt aangegeven door een horizontale groene lijn in de volumebalken.




Alleen het volume in het linkerhoortoestel aanpassen

Om alleen het volume aan de linkerkant aan te passen, drukt u eerst op de toets '<' op het toetsenbord (8 op pagina 9). Zo wordt de afstandbediening voor links geactiveerd en voor rechts gedeactiveerd. Dit wordt aangegeven door een pijltje naar links (<) in het scherm, en het pijltje naar rechts wordt inactief. Daarnaast ziet u een gedimde volumebalk aan de rechterkant. Nu drukt u op '+' of '-' om alleen het volume in het linkerhoortoestel aan te passen.

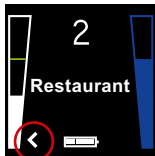

Alleen het volume in het rechterhoortoestel aanpassen

Om alleen het volume aan de rechterkant aan te passen, drukt u eerst op de toets '>' op het toetsenbord (9 op pagina 9). Zo wordt de afstandbediening voor rechts geactiveerd en voor links gedeactiveerd. Dit wordt aangegeven door een pijltje naar rechts (>) in het scherm, het pijltje naar links wordt inactief. Daarnaast ziet u een gedimde volumebalk aan de linkerkant. Druk nu op '+' of '-' om alleen het volume van het rechterhoortoestel aan te passen.

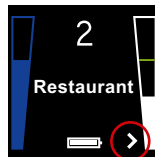

Om terug te keren naar de aanpassingsmodus voor beide toestellen tegelijk, drukt u op de toets '<' of '>' (8 of 9 op pagina 9) op het toetsenbord, totdat beide pijltjes tegelijkertijd worden weergegeven. Nu is de afstandbediening voor beide hoortoestellen actief.





Opmerking: als synchronisatie tussen apparaten in uw hoortoestellen is ingeschakeld, worden individuele volumeaanpassingen automatisch in het linker- én rechertoestel gedaan.

Mute/Unmute (niet beschikbaar op Alera hoortoestellen)

U kunt de microfoons van het hoortoestel op stil zetten en weer inschakelen door op de muteknop (5 op pagina 8) te drukken op de Afstandbediening 2. Het op stil zetten of weer inschakelen

geldt voor beide hoortoestellen tegelijk, en kan niet geselecteerd worden voor alleen het linker- of rechertoestel.

Als de microfoons op stil staan, ziet u in plaats van het microfoon-icoontje  hetzelfde icoontje met een streep erdoor  en zijn de volumebalken gedimd. Druk nogmaals op de muteknop om de microfoons van het hoortoestel weer in te schakelen.

Streaming activeren

Als u gebruik maakt van een optionele ReSound streamer zoals de Unite TV of MiniMicrofoon, dan kunt u ze activeren door op de streamingknop te drukken (3 op pagina 8). Zie ook het hoofdstuk over het gebruik van optionele streamingapparaten.

Basisinstellingen herstellen

De instellingen die gelden als de hoortoestellen aangezet worden, kunt u activeren door op de HOMEknop te drukken (4 op pagina 8):


- a. Activeert programma 1 in beide hoortoestellen
- b. Zet beide hoortoestellen terug naar standaard volumeinstellingen

Met de knop HOME worden ook alle gestreamde audiosignalen van de optionele ReSound streamingapparaten beëindigd.

Waarschuwing lage accuspanning

Waarschuwing lage accuspanning Afstandbediening 2


Het accuniveau van de Afstandbediening 2 wordt weergegeven door een accumulator met drie balken. Als de accu gebruikt wordt, verdwijnen de balken één voor één bij het leger worden van de accu. Als de accu bijna leeg is, knippert de accumulator om aan te geven dat de accu opgeladen moet worden.

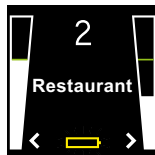


Accu bijna leeg
Afstandbediening 2

Waarschuwing lage batterijspanning hoortoestel

Als de hoortoestellen bijna leeg zijn, wordt dit weergegeven in het scherm van de Afstandbediening 2, naast de volumebalk(en). De pijltjes voor het linker- (<) of rechter- (>) toestel wisselen tussen een pijl en een verticale batterijweergave om aan te geven dat het linker- of rechertoestel bijna leeg is.

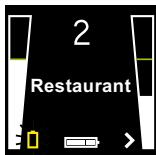

Batterij bijna leeg in linkerhoortoestel

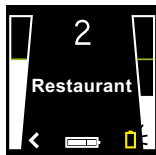


Batterij bijna leeg in rechterhoortoestel


Bij een lage spanning kunnen de Afstandbediening 2 en andere draadloze apparaten slechter gaan functioneren. De resterende batterijduur is afhankelijk van het soort hoortoestel en de gebruiksmodus. Om te blijven profiteren van volledige werking, kunt u het beste direct na de waarschuwing van lage batterijspanning nieuwe batterijen plaatsen.

Operationeel bereik


Het operationeel bereik tussen de Afstandbediening 2 en de hoortoestellen is ongeveer 1 meter. Als u de status niet op de Afstandbediening 2 kunt aflezen, houd hem dan voor uw borst, zoals weergegeven op de afbeelding.



Als de Afstandbediening 2 de status van de hoortoestellen niet kan vinden, verschijnen er zoekpictogrammen  op de Afstandbediening 2. Houd de Afstandbediening 2 vast zoals afgebeeld om contact te maken met beide hoortoestellen.

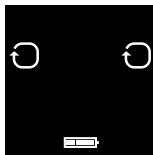

Verbinding zoeken voor beide hoortoestellen

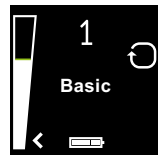

Verbonden met linkerhoortoestel en zoeken naar rechterhoortoestel

Scherf

Om de batterij te sparen, beschikt de Afstandbediening 2 over een standby-functie. Hiermee schakelt de Afstandbediening 2 automatisch in de slaapstand als het scherm 20 seconden niet gebruikt is. Als het scherm zwart is, druk dan op het toetsenbord om het scherm te activeren en voer daarna de gewenste handeling uit.

Werking Afstandbediening 2

De Afstandbediening 2 werkt het beste als de toetsen één voor één worden ingedrukt, in plaats van heel snel achter elkaar. Als u bijvoorbeeld het volume wilt wijzigen, drukt u kort op een knop en wacht u even op de pieptonen* voordat u weer doorgaat. Deze tip geldt voor alle toetsen, maar is vooral van toepassing op de volume-aanpassing.


* *Let erop dat deze tonen uitgeschakeld kunnen zijn door uw audicien tijdens het aanpassen.*

Pairen

Let op: de volgende informatie is voornamelijk bedoeld voor uw audicien, die meestal de handelingen uitvoert die nodig zijn om de ReSound Unite Afstandbediening te laten werken met uw hoortoestel. Het proces is echter eenvoudig en kan door bijna iedereen worden uitgevoerd.

Pairen is het instellen van een exclusieve communicatie tussen uw hoortoestellen en uw Afstandbediening 2. Uw audicien kan deze pairing doen tijdens de aanpassing van uw hoortoestel. U kunt anders onderstaande stappen volgen om uw hoortoestel te pairen op de Afstandbediening 2.

1. Zorg dat de Afstandbediening 2 volledig opgeladen en ingeschakeld is. Uw hoortoestellen moeten uitgeschakeld zijn, open de batterijlades.
2. Druk eenmaal op de pairingknop op de Afstandbediening 2 (11 op pagina 9). De pairingmodus is nu 20 seconden actief.
3. Nu de pairingmodus actief is, sluit u de batterijlade van beide hoor-

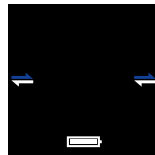

Hoortoestellen zoeken

toestellen en controleert u of ze aan staan. Een succesvolle pairing herkent u aan een melodie in beide hoortoestellen en u ziet op het scherm van de Afstandbediening 2 actieve volumebalken en Programma '1' staan (zie onder). U kunt de Afstandbediening 2 nu gebruiken!



Hoortoestellen in programma 1

Optionele audiostreamers gebruiken

De ReSound Unite TV™ en de MiniMicrofoon™ zijn optionele audio- en spraakstreamingapparaten die werken in combinatie met uw hoortoestellen.

De Unite TV verzendt audiosignalen van uw televisie, stereo-installatie, computer, etc. rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

De MiniMicrofoon streamt spraak- en audiosignalen rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

Om audio te streamen van de TV Streamer of Minimicrofoon, drukt u op de streamingknop (3 op pagina 8) op de Afstandbediening 2. De hoortoestellen gaan nu uw streamer zoeken.



Streaming activeren van de ReSound Unite™ TV

Om het streamen van de televisie, stereo of een ander apparaat te starten dat is aangesloten op de Unite TV, zet u het audio-apparaat aan en drukt u op de streamingknop (3 op pagina 8). De hoortoestellen beginnen direct te zoeken naar de Unite TV en maken verbinding.



Zoeken naar televisie



Verbonden met de TV



Televisie niet gevonden

U kunt maximaal 3 streamingapparaten verbinden met uw hoortoestellen. Iedere streamer heeft op de Afstandbediening een eigen letter: A, B of C. Als er meerdere streamingapparaten in gebruik zijn, druk dan net zo lang op de streamingknop tot u het gewenste audiosignaal hoort.

Volume aanpassen in streamingmodus

(Beperkte functionaliteit voor draadloze ReSound Alera hoortoestellen. Zie de paragraaf 'Volume aanpassen ReSound Alera streamingmodus').

Als de streamingmodus is ingeschakeld, zijn de volumeaanpassingen van beide hoortoestellen (linkervolumebalk) en van de gestreamde audio (rechtervolumebalk) beide standaard 'actief'. Dit ziet u aan de twee pijltjes (< en >) naast de volumebalken op het scherm. Om zowel het volume van het hoortoestel als het audio-volume tegelijkertijd aan te passen, drukt u op de toets '+' of '-' (6 of 7 op pagina 9) op de Afstandbediening 2.

Let op: Als u twee hoortoestellen gebruikt wordt iedere volume-aanpassing toegepast op beide hoortoestellen tegelijk.

Het is ook mogelijk om individuele volumeaanpassingen aan de hoortoestellen en het gestreamde audiosignaal te doen.

Alleen volume hoortoestellen aanpassen



Om het volume van de hoortoestellen aan te passen, drukt u op de toets '<' op het toetsenbord (8 op pagina 9). Nu ziet u twee pijltjes '< >' naast de volumebalk van de hoortoestellen: de volumebalk van de gestreamde audio wordt gedimd.

Druk op '+' of '-' (6 of 7 op pagina 9) om het volume van de hoortoestellen aan te passen.

Om terug te keren naar de gelijktijdige aanpassingsmodus, drukt u op de toets '>' (9 op pagina 9) op het toetsenbord tot er één pijltje naast iedere volumebalk in het scherm staat, wat aangeeft dat beide volumeniveaus 'actief' zijn.



Alleen volume gestreamde audio aanpassen



Om het volume van de gestreamde audio aan te passen, drukt u op de toets ">" op het toetsenbord (9 op pagina 9). Nu ziet u twee pijltjes '< >' naast de volumebalk van de gestreamde audio en het volume van de 'hoortoestellen' wordt gedimd.

Druk op '+' of '-' (6 of 7 op pagina 9) om het volume van de gestreamde audio aan te passen.

Om terug te keren naar de modus voor gelijktijdige aanpassing, drukt u op de toets '<' (8 op pagina 9) op het toetsenbord tot er één pijltje verschijnt naast iedere volumebalk op het scherm, wat aangeeft dat beide volumeniveaus 'actief' zijn.



Volume aanpassen ReSound Alera streamingmodus

Als u draadloze ReSound Alera hoortoestellen gebruikt, wordt de volume-aanpassing alleen toegepast op het gestreamde audiosignaal.


Pas indien nodig het volume aan met de toetsen '+' en '-' (6 en 7 op pagina 9). Het volume van het gestreamde audiosignaal kan ook afzonderlijk worden aangepast voor het linker- of rechtoestel met de knoppen < of > (8 of 9 op pagina 9).

Om het streamen te stoppen en terug te keren naar het vorige programma, drukt u op de knop 'P' (10 op pagina 9). U kunt ook op de HOMEknop (4 op pagina 8) drukken, waarmee de hoortoestellen worden ingesteld op standaardinstellingen (zie paragraaf 'Terug naar standaardinstellingen').

Telefoon (optioneel)

ReSound Unite™ Telefoonclip+ en PhoneNow™ werken ook in combinatie met de Afstandbediening 2. Als u de Telefoonclip+ of PhoneNow gebruikt, wordt dit op het scherm weergegeven.

Als het telefoongesprek beëindigd is, keren de hoortoestellen weer terug naar het vorige programma. Dat programma wordt weergegeven op het scherm van de Afstandbediening 2. Volume-aanpassingen die tijdens het telefoongesprek gedaan worden, worden niet overgenomen in het vorige programma.

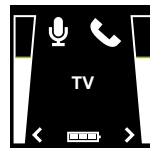

Door een telefoongesprek wordt het streamen van de streaming-apparaten tijdelijk onderbroken, en dit wordt weer hervat als het telefoongesprek beëindigd is.

Bijlage: uitzonderingen op normaal gebruik

Wij raden aan om beide toestellen altijd in hetzelfde programma te zetten. Twee verschillende programma's is echter wel mogelijk: bijvoorbeeld programma 1 aan de linkerkant en gestreamde audio aan de rechterkant. In dit geval werkt de Afstandbediening 2 iets anders, zoals te zien is in de volgende voorbeelden.

Situatie 1: u gebruikte eerst in beide oren programma 1, maar heeft met behulp van de drukknop op het rechtertoestel de rechterkant ingesteld op programma 2. Als u nu op de knop 'P' op de Afstandbediening 2 drukt, schakelt het linkertoestel naar programma 2, net als uw rechtertoestel. Als u nu nog vaker op de toets 'P' drukt, wordt het programma aan beide kanten gelijktijdig gewijzigd.

Situatie 2: u heeft uw linkerhoortoestel ingesteld op programma 1 en het rechter op programma 2. Als u nu op de knop Streaming drukt, ontvangen uw beide hoortoestellen gestreamd geluid uit dezelfde bron (bijvoorbeeld de TV). Als u nu op de knop P drukt, wordt de streaming aan beide kanten uitgeschakeld en keren uw beide hoortoestellen terug naar hun vorige programma (programma 1 en programma 2).

Situatie 3: op uw linkerhoortoestel is programma 1 actief maar u heeft door de knop op uw rechterhoortoestel in te drukken voor de rechterkant streaming geactiveerd. Als u nu op de knop 'P'

druk, keert uw rechterhoortoestel terug naar het programma dat daarvoor actief was, en uw linkerhoortoestel gaat naar het volgende programma. Door nogmaals op de knop 'P' te drukken, worden beide hoortoestellen weer naar hetzelfde programma geschakeld.

Als u in plaats daarvan op de knop Streaming drukt, worden uw beide hoortoestellen ingesteld op hetzelfde gestreamde audio-programma.

Situatie 4: beide hoortoestellen zijn ingesteld op programma 1, maar u gebruikt voor uw linkeroor de functie PhoneNow. Als u tijdens het telefoongesprek op de knop 'P' drukt, schakelt de rechterkant over op programma 2, wat geen invloed heeft op uw telefoongesprek. Na het gesprek blijft uw linkertoestel in programma 1. Als u in plaats daarvan tijdens het telefoongesprek op de knop Streaming drukt, wordt alleen aan de rechterkant streaming gestart, zodat u met uw linkertoestel kunt blijven telefoneren.

Situatie 5: u heeft de streaming middels de Streamingknop geactiveerd voor beide oren, maar gebruikt links de functie PhoneNow. Als u tijdens het telefoongesprek op de knop 'P' drukt, wordt de streaming aan de rechterkant gestopt, wat geen invloed heeft op uw telefoongesprek. Als u in plaats daarvan tijdens het telefoongesprek op de knop Streaming drukt, schakelt de streaming aan de rechterkant over op het volgende streaming-programma, zodat u met uw linkertoestel kunt blijven telefoneren.

Situatie 6: als uw hoortoestellen in verschillende hoortoestelprogramma's staan, wordt alleen het programmanummer voor ieder hoortoestel weergegeven. Er wordt geen programmaam weergegeven.

Situatie 7: als er één hoortoestel in streamingmodus staat en de andere in één van de hoortoestelprogramma's, wordt alleen de streamingweergave getoond, zonder programmanummer of -naam.

Belangrijke informatie



Onderhoud en zorg

- Maak de Afstandbediening 2 schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsproducten (waspoeder, zeep, etc.) of alcohol om het apparaat te reinigen.
- Bescherm de Afstandbediening 2 tegen overmatig vocht (douchen, zwemmen) en warmte (verwarming, auto, dashboard). Voorkom grote schokken en trillingen.

Algemene waarschuwingen



- Houd de Afstandbediening 2 buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- De Afstandbediening 2 maakt gebruik van low power digitaal gecodeerde transmissie om met andere draadloze apparaten te communiceren. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving beïnvloed worden. Mocht dit gebeuren, zorg dan dat er meer afstand is tussen de Afstandbediening 2 en desbetreffende apparatuur.
- Wanneer u tijdens gebruik van de Afstandbediening 2 last heeft van elektromagnetische storing, verwijder u dan van de bron van de storing.



- Uw hoortoestel en de Afstandbediening 2 hebben tijdens de aanpassing een unieke netwerkcode meegekregen. Dit zorgt ervoor dat het apparaat geen hoortoestellen van anderen kan beïnvloeden.
- Hoogspanningsapparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen mogelijk het signaal aantasten en de reikwijdte aanzienlijk verminderen.
- Gebruik alleen originele accessoires van ReSound.
- Doe geen veranderingen of aanpassingen aan de Afstandbediening 2.
- Door de Afstandbediening 2 te openen, kunt u er schade aan toebrengen. Als er problemen optreden die niet kunnen worden opgelost met behulp van de richtlijnen in deze handleiding, neem dan contact op met uw audicien.
- De Afstandbediening 2 mag alleen gerepareerd worden door een bevoegd servicecenter.
- Gebruik de Afstandbediening 2 niet in ruimtes waar RF-overdracht verboden is, bijvoorbeeld vliegtuigen, etc.
- Pair de Afstandbediening 2 alleen met apparaten waar hij expliciet voor bedoeld is.



Neem s.v.p. het onderstaande in acht

- Uw apparaat wordt gevoed door een oplaadbare accu.
- Optimale prestaties van een nieuwe accu worden pas bereikt nadat deze twee of drie keer volledig opgeladen en weer ontladen is.
- De accu kan honderden keren opgeladen en ontladen worden, maar uiteindelijk zal hij 'opraken'.
- Koppel de oplader los van de wandcontactdoos en van de Afstandbediening 2 als hij niet in gebruik is.
- Als hij niet gebruikt wordt zal een volledig opgeladen accu langzamerhand zijn lading verliezen.
- Als u het product op hete plekken achterlaat, zoals een afgesloten auto in de zomer, verlaagt dit de capaciteit en levensduur van de accu.
- Een apparaat met een koude accu werkt mogelijk tijdelijk niet, ook al is de accu volledig opgeladen. De prestaties van de accu zijn met name beperkt in temperaturen ruim onder het vriespunt.

Waarschuwing accu

- Let op: de batterij die voor dit product gebruikt wordt, kan bij verkeerd gebruik een risico tot brand of chemische brandwonden vormen.
- Probeer het apparaat niet te openen of de accu te vervangen.
- Deze is ingebouwd en niet vervangbaar. Gebruik van andere accu's geeft een risico op brand of ontploffing en de garantie is in dat geval niet meer geldig.
- De accu in uw apparaat mag niet verwijderd of vervangen worden door de gebruiker. Iedere poging om dit wel te doen is gevaarlijk en kan leiden tot beschadiging van het product.
- Laad de Afstandbediening 2 alleen op met een lader die samen met het product geleverd is.
- Ruim de accu s.v.p. op in overeenstemming met de lokale reglementen. Recycle waar mogelijk.
- Gooi de accu niet als huishoudelijk afval weg, en gooi hem niet in een vuur, omdat hij kan exploderen.
- Accu's kunnen exploderen als ze beschadigd zijn.

Onderhoud oplader

Neem s.v.p. het onderstaande in acht als er een oplader wordt geleverd bij het apparaat.

- Probeer uw product niet te laden met andere producten dan de meegeleverde AC-adapter. Gebruik van andere opladers kan het apparaat beschadigen of vernielen en kan gevaarlijk zijn.
- Door het gebruik van andere laders kan een goedkeuring of garantie ongeldig worden.
- Voor beschikbaarheid van goedgekeurde uitbreidingen vraagt u advies aan uw audicien.
- Laad het apparaat op volgens de meegeleverde instructies.

Waarschuwing oplader

- Als u de stroomkabel of adapter uit het stopcontact haalt, trek dan altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader.
- Probeer de oplader nooit uit elkaar te halen omdat u zich dan blootstelt aan het gevaar van een elektrische schok.
- Het incorrect weer in elkaar zetten kan tijdens het gebruik een elektrische schok of zelfs brand veroorzaken.
- Vermijd het opladen in extreem hoge of lage temperaturen en gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimtes.

Technische specificaties

Operationeel bereik:	tot 3 meter
Draadloos:	2,4 GHz
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 55 °C
Bewaartemperatuur:	-20 tot 60 °C

Temperatuurtest, transport en opslaginformatie

Dit product is onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten in verwarmingscycli tussen -25°C en +70°C conform interne- en industriestandaarden.

Garantie

De ReSound Unite™ Afstandbediening 2 heeft een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de dag van aankoop. Houd er rekening mee dat er in uw land mogelijk andere garanties gelden. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.

Wat dekt deze garantie?

Een elektrisch apparaat dat door defecten in werkzaamheden, productie of ontwerp niet correct functioneert bij normaal gebruik, worden onderdelen gratis vervangen of gerepareerd als het geretourneerd wordt naar de winkel waar het gekocht is.

Als bepaald wordt dat reparatie niet haalbaar is, kan, na wederzijdse instemming tussen de audicien en de klant, het gehele product vervangen worden door een vergelijkbaar product.

Wat is niet gedekt door de garantie?

Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onderhoud, ongelukken, reparaties door onbevoegde partijen, blootstelling aan corroderende omstandigheden of schade door vreemde objecten die in het apparaat gestopt zijn, worden NIET gedekt door de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. Bovenstaande garantie heeft geen invloed op alle juridische rechten die u zou kunnen hebben onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Uw audicien kan een garantie afgegeven hebben die verder gaat dan de clausules in deze beperkte garantie. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het scherm blijft uit als ik op een toets op de Afstandbediening 2 druk</i>	<p>De Afstandbediening 2 is uitgeschakeld</p> <p>De accu in de Afstandbediening 2 is leeg</p>	<p>Zet de Afstandbediening 2 aan door de Aan/uit-schakelaar naar AAN te schuiven</p> <p>Laad de accu opnieuw op</p>
<i>Er wordt geen informatie weergegeven op het scherm als ik het activeer door op een toets op de afstandbediening te drukken</i>	<p>De Afstandbediening 2 en de hoortoestellen zijn niet gepaard</p>	<p>Voer de pairingprocedure uit</p>
<i>Ik druk de pairingknop op de Afstandbediening 2 in, maar het pictogram 'zoeken' op het scherm wordt niet vervangen door de status van het hoortoestel</i>	<p>De Afstandbediening 2 en het hoortoestel bevinden zich niet binnen hun draadloze bereik</p> <p>De Afstandbediening 2 en hoortoestellen stonden niet tegelijkertijd in pairingmodus</p>	<p>Verzeker u ervan dat de Afstandbediening 2 en de hoortoestellen zich binnen hun draadloos bereik bevinden en herhaal het pairingproces.</p> <p>Herhaal het pairingproces en verzekert u ervan dat de batterijlades van beide hoortoestellen gesloten worden binnen 20 seconden nadat de pairingknop op de Afstandbediening 2 is ingedrukt is.</p>

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het pictogram 'zoeken' wordt voortdurend weergegeven op het scherm van de Afstandbediening 2</i>	De Afstandbediening 2 en de hoortoestellen zijn niet binnen hun draadloos bereik	Controleer of de Afstandbediening 2 en de hoortoestellen binnen hun draadloos bereik zijn
	Het hoortoestel staat niet aan	Zet het hoortoestel aan
	De batterij in het hoortoestel is leeg	Vervang de batterij in het hoortoestel
<i>Er worden twee verschillende programmanummers of icoontjes op het scherm weergegeven</i>	De twee hoortoestellen staan niet in hetzelfde programma. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een van de hoortoestellen niet binnen het draadloze bereik was toen er een commando gegeven werd vanaf de Afstandbediening 2. Of omdat u het programma op een van de hoortoestellen veranderd hebt door op de programmaknop te drukken.	Stel dezelfde programma's op de hoortoestellen in met behulp van de Afstandbediening 2 of de programmaknop op het hoortoestel
		<i>Let op:</i> Door interne prioriteiten heeft dit commando geen effect op een hoortoestel dat in het telefoonprogramma staat (herkenbaar door het telefoonicoontje dat op het scherm van de Afstandbediening 2 wordt weergegeven)

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Als ik het volume op de hoortoestellen aanpas met de toets '+' of '-', verandert het volume niet</i>	De volumeregeling is slechts voor één hoortoestel geactiveerd (er wordt slechts een van de pijltjes '<' of '>' op het scherm van de Afstandbediening 2 weergegeven)	Druk op de toets '<' of '>' om de volumeregeling ook voor het andere oor te activeren

Notities:

Notities:

Notities:

Notities:

Lees informatie met een waarschuwingssymbool zorgvuldig door



WAARSCHUWING wijst op een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen.

VOORZORGSMAATREGEL wijst op een situatie die kan leiden tot kleine verwondingen.



Advies en tips over hoe beter om te gaan met uw ReSound Unite accessoire.



Apparatuur maakt gebruik van RF-overdracht



Dit product valt onder Type B contactonderdelen



Vraag uw audicien naar het afvoeren van uw ReSound accessoire



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische Apparatuur 93/42/EEC en Richtlijn R&TTE 1999/5/EEC dienen gericht te worden aan GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Denemarken

Internationaal hoofdkantoor

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

Contactgegevens België

Tel.: +32 (0)2 513 55 91
Fax: +32 (0)2 502 04 09
info@gnresound.be

GN Hearing Benelux B.V.

ReSound
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
Tel.: +31 (0)26 319 5000
Fax: +31 (0)26 319 5001
info@gnresound.nl
www.resound.nl

ReSound



red|scover hearing